

Date d'édition : 27.04.2026

Ref : P6.3.3.6

**P6.3.3.6 Loi de Moseley et détermination de la constante de Rydberg**



Dans l'expérience P6.3.3.6, on détermine la longueur d'onde des arêtes d'absorption en fonction du numéro atomique  $Z$ .

On obtient la constante de Rydberg  $R$  et le blindage moyen  $\sigma$  avec la loi de Moseley

$$1/\lambda = R \cdot (Z - \sigma)^2$$

d'après les données mesurées.

Équipement comprenant :

1 554 801 Appareil à rayons X Mo, complet

1 559 01 Tube compteur à fenêtre pour rayonnements  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  et X avec câble

1 554 832 Lot de films d'absorption

1 En complément : PC avec Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 ou x64)

### Catégories / Arborescence


Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Physique atomique et nucléaire > Rayons X > Physique cortège électronique

### Options

Date d'édition : 27.04.2026

Ref : 554801

**Appareil à rayons X Mo, complet / Avec : Tube de molybdène, Goniomètre (554831), Cristal NaCl (55478), Film de Zircon, Logiciel, Câble USB, Housse, Plaque de protection**

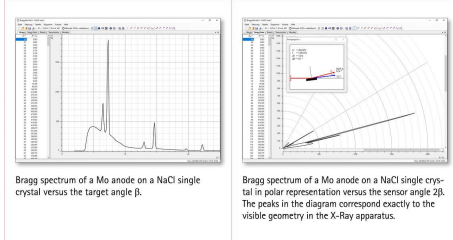

Bragg spectrum of a Mo anode on a NaCl single crystal versus the target angle  $\theta$ .

Bragg spectrum of a Mo anode on a NaCl single crystal in polar representation versus the sensor angle  $2\theta$ . The peaks in the diagram correspond exactly to the visible geometry in the X-Ray apparatus.

Appareil complet commandé par microprocesseur avec tube de Mo et goniomètre pour la réalisation de nombreuses expériences du domaine de la physique des rayons X.

Une partie génération de haute tension, un tube à rayons X et une partie expérimentation sont regroupés dans un boîtier parfaitement clos et protégés contre les rayonnements.

L'appareil est homologué comme dispositif à rayons X pour l'enseignement et appareil à protection totale.

L'homologation est également valable pour d'autres tubes (Fe, Cu, Ag, W, Au) livrés ajustés, prêts à l'emploi, en vue d'un changement aisé.

Une sécurité optimale et un grand confort d'utilisation sont garantis par un système de verrouillage qui déverrouille automatiquement les portes lorsque plus aucun rayonnement X n'est généré.

Deux grands affichages donnent des informations exhaustives sur l'expérience en cours.

La tension et le courant du tube sont réglables respectivement de 0 à 35 kV et de 0 à 1 mA.

Utilisé avec l'indicateur de valeur moyenne intégré, l'appareil à rayons X permet la mesure directe avec un tube compteur Geiger-Müller ( 559 01 ).

Pour relever des spectres de Bragg, il suffit de le brancher à un PC (logiciel inclus au matériel livré) via un port USB.

Une alternative consiste à recourir aux deux sorties analogiques (taux de comptage et position angulaire) qui permettent, quant à elles, d'enregistrer les données avec un enregistreur.

Le goniomètre ( 554 831 ) permet d'adopter manuellement les diverses positions angulaires prévues pour le capteur et la cible ; le capteur et la cible couplés dans un rapport 2 : 1 peuvent également être déplacés manuellement ou pour le balayage automatique d'un domaine angulaire.

La partie expérimentation est accessible par l'intermédiaire de deux conduites coaxiales blindées ainsi que par un canal libre, par ex. pour la connexion d'un détecteur d'énergie de rayonnement X entraîné par un goniomètre.

L'appareil est assemblé et ajusté, prêt à l'emploi.

### Caractéristiques techniques :

Dispositif à rayons X pour l'enseignement et appareil à protection totale avec l'homologation BFS 05/07 V/Sch RöV (permet l'utilisation avec des tubes interchangeables au Fe, Cu, Mo, Ag, W, Au)

Taux de dose à une distance de 10 cm : < 1  $\mu$ S/h

Respectivement deux circuits de sécurité indépendants et surveillés pour les portes, la haute tension et le courant du tube (certifié par le TÜV Rheinland et conforme aux exigences pour les essais de type PTB 2005)

Verrouillage automatique de la porte : l'ouverture est seulement possible lorsque plus aucun rayonnement X n'est généré (certifié par le TÜV Rheinland et conforme aux exigences pour les essais de type PTB 2005)

Haute tension du tube : 0 ... 35,0 kV (tension continue régulée)

Courant du tube : 0 ... 1,00 mA (courant continu régulé de manière indépendante)

Tube à rayons X visible avec anode au molybdène pour un rayonnement caractéristique à ondes courtes :  $K\alpha = 17,4$  keV (71,0 pm),  $K\beta = 19,6$  keV (63,1 pm)

Écran luminescent pour des expériences de radiographie :  $d = 15$  cm

Indicateur de valeur moyenne intégré, avec l'alimentation en tension pour le compteur de Geiger-Müller

Haut-parleur : activable pour le suivi acoustique du taux de comptage

Deux affichages à 4 chiffres (25 mm de haut) pour la visualisation au choix des valeurs actuelles de la haute tension, du courant anodique, du taux de comptage, de l'angle de la cible ou du capteur, du domaine de balayage, du pas de progression, du temps de porte

Goniomètre ( 554 831 ) commandé par moteur pas à pas Modes de fonctionnement : réglage manuel et balayage automatique pour le capteur seul, la cible seule, couplage 2 : 1 Plage angulaire : illimitée (de 0° à 360°) pour la cible, de -10° à +170° pour le capteur Pas de progression : 0,1°

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 27.04.2026

Minuterie d'exposition, temps de porte : 0,5 s ... 9999 s

Réalisation des essais dans la partie expérimentation : câble coaxial haute tension, câble coaxial BNC, canal vide, par ex. pour des tuyaux, câbles, etc.

Sorties analogiques : proportionnellement à l'angle de la cible et au taux de comptage pour la connexion de l'enregistreur

Port USB pour le branchement du PC pour l'

**Ref : 554832**

**Lot de films d'adsorption pour l'appareil à rayons X**

en Aluminium, Fer, Cuivre, Zirconium, Molybdène, Argent, Indium



Pour l'appareil à rayons X (554 801 ), par exemple pour des expériences sur la relation 3 et sur la loi de Moseley ; films dans monture pour mise en place sur le collimateur à fente ou sur le support pour compteur.

Caractéristiques techniques :

Monture : 24 mm x 11 mm Ø

Films : 10 mm Ø

Matériel livré :

Z Element Thickness

13 Al Aluminium 0.5 mm

26 Fe Iron 0.5 mm

29 Cu Copper 0.07 mm

40 Zr Zirconium 0.05 mm

42 Mo Molybdenum 0.1 mm

47 Ag Silver 0.05 mm

49 In Indium 0.3 mm



Date d'édition : 27.04.2026

**Ref : 55901**

**Tube compteur à fenêtre rayon. Alpha, Beta, Gamma et X**



Tube compteur Geiger-Müller à auto-extinction, dans boîtier en plastique, avec fenêtre en mica très mince permettant aussi l'enregistrement d'un rayonnement  $\beta$  mou. Muni d'un câble solide. Livré avec capuchon de protection pour la fenêtre en mica.

Caractéristiques techniques :

Charge de gaz : néon, argon, halogène

Tension de service moyenne : 450V

Connexion : câble blindé de 55cm de long, avec connecteur coaxial (Amphénoïl Tuchel T 3162/1)

Largeur du palier : 200 V

Pente relative du palier :  $< 0,05\%/V$

Temps mort : env. 100  $\mu s$

Longévité :  $> 10^6$  imp.

Bruit de fond du palier : env. 0,2Imp./s (pour un blindage avec 50mm de Pb et 3mm d'Al)

Sensibilité au rayonnement ? : env. 1%

Fenêtre : 9 mm  $\varnothing$

Assignation des masses : 1,5 ... 2mg/cm<sup>2</sup>

Dimensions : 75 mm x 24 mm  $\varnothing$

En option:

Complément nécessaire :

Compteur d'impulsions à alimentation haute tension intégrée